



1. Ne pas utiliser Canal-Seek chez un patient présentant une allergie ou une inflammation au bleu de méthylène.
2. La réutilisation de l'embout fermé peut causer une infection croisée, il est donc interdit de réutiliser l'embout.

■ Attention

1. Pour usage dentaire uniquement.
2. Il n'est pas utilisé chez les patients ayant des antécédents d'éruption cutanée et d'hypersensibilité à la dermatite.
3. Ce produit est utilisé uniquement pour les tissus oraux.  
Veillez à ce qu'il ne pénètre pas dans les yeux.
4. En cas de contact avec la peau ou les yeux, lavez-les plusieurs fois à l'eau claire et consultez un spécialiste si nécessaire.
5. Ce produit est interdit pour un usage autre que celui prévu.  
Et l'utilisation par des non-professionnels est interdite.
6. Respecter la procédure et les précautions.
7. Gardez-le hors de portée des utilisateurs non-dentaires, y compris les enfants, les personnes âgées et autres.
8. Ne pas utiliser après la date de péremption.
9. Il y a un risque d'endommagement du produit, évitez les chocs excessifs.
10. Il est interdit d'utiliser ce produit à d'autres fins que ses composants.

■ Stockage


1. Conserver dans un endroit frais. (1~30°C)
2. Éviter l'exposition à la lumière directe du soleil.

■ Contenu

- # 507 Canal-Seek 3ml x 1seringue / embouts de brosse

■ Durée de conservation

- 2 ans à compter de la date de fabrication

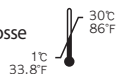

KTR EUROPE GMBH

Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn,  
Germany

Telephone : +49-6196-887170

SYMBOLES

: Date limite d'utilisation

: Code du lot

: Attention

: Garder au sec

: Fabricant

: Date de fabrication

: Représentant autorisé dans la Communauté européenne

: Limite de température

: Consulter le mode d'emploi

: Éviter la lumière du soleil

: Numéro de catalogue

: Pays de fabrication

: Model number

: Identifiant unique de l'appareil : Medical device

: Ne pas réutiliser

MEDICLUS CO., LTD.

No.1210, 134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do 28576, Korea

Tel. +82-43-211-2877 / Fax. +82-43-211-2866

E-mail : sales@mdclus.com

Rev.3 2022.04.25 MDI-CS01-03

020206



# Canal-Seek™

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### Instructions for use

Canal-Seek est destiné à être utilisé pendant le traitement endodontique pour identifier les orifices du canal radiculaire. Le colorant bleu contenu dans le produit pénètre dans les orifices canaux et les colore en bleu, ce qui facilite le repérage des principaux orifices canaux et la détection des fissures.

Canal-Seek Root canal orifices indicator.

Canal-Seek is intended for use during endodontic treatment to identify the root canal orifices. Blue dye contained in the product invades into the root canal orifices and dyes them blue which makes it easier to find the main root canal orifices and detect the cracks.

**MDCLUS**  
MEDICLUS CO., LTD.



Canal-Seek est destiné à être utilisé pendant le traitement endodontique pour identifier les orifices du canal radiculaire. Le colorant bleu contenu dans le produit pénètre dans les orifices canalaires et les colore en bleu, ce qui facilite le repérage des principaux orifices canalaires et la détection des fissures.

**■ Indications**

Révélation de la dentine cariée dans les préparations de cavités.

**■ Composition**

- ① Bleu de méthylène 35~40%.
- ② Propylène glycol 10~30%.
- ③ Eau Ph. Eur 10~30%

**■ Méthode d'application**

## 1. Avant l'utilisation

- ① Vérifiez la date de péremption et faites attention à l'emballage contaminé.
- ② Suivez les instructions avant de l'utiliser.
- ③ Prévoir un dispositif de protection des voies respiratoires avant l'application.
- ④ Après utilisation, refermer le bouchon pour minimiser la volatilité.

## 2. Applications

- ① Avant le traitement, immergez l'applicateur dans de l'alcool éthylique, puis placez-le sur la seringue.
- ② Enlever la dentine à l'endroit où les orifices du canal radiculaire sont attendus, insérer 1~3 gouttes de préparation au fond de la cavité dentaire, attendre 5~10 secondes, puis rincer et sécher la cavité dentaire.
- ③ Les points intenses teintés en bleu indiquent les orifices du canal radiculaire.
- ④ Après utilisation, retirer le piston de la seringue pour éviter le débordement de la préparation, visser l'applicateur et le boucher dans la seringue avec le capuchon.
- ⑤ Produit destiné à un usage multiple, à l'exception de l'applicateur qui est à usage unique.
- ⑥ L'utilisation multiple de l'applicateur peut causer un risque de ré-infection.

**■ Contre-indications**

Canal-Seek Root canal orifices indicator. Canal-Seek is intended for use during endodontic treatment to identify the root canal orifices. Blue dye contained in the product invades into the root canal orifices and dyes them blue which makes it easier to find the main root canal orifices and detect the cracks.

**■ Indications**

Disclosing caries dentin in cavity preparations.

**■ Composition**

- ① Methylene blue 35~40%
- ② Propylene glycol 10~30%
- ③ Water Ph. Eur 10~30%

**■ Application method**

## 1. Before the application

- ① Check the expiration date and be cautious of the package contaminated.
- ② Follow the instructions before using it.
- ③ Be sure a protection device for the respiratory before the procedure.
- ④ After use, close the cap immediately to minimize volatility.

## 2. Applications

- ① Before the treatment immerse attached applicator in spirit (ethyl alcohol) and then place it onto the syringe.
- ② Remove dentine where the root canal orifices are expected, insert 1~3 drops of preparation into the bottom of the tooth cavity, wait 5~10 seconds, next rinse and dry the tooth cavity.
- ③ Points intensive dyed in blue indicate the root canal orifices.
- ④ After use withdraw the syringe piston to prevent overflow of preparation, screw off applicator and then capped into the syringe with cap
- ⑤ Product intended for multiple use except the applicator which is for single use only.
- ⑥ Multiple use of applicator may cause the risk of re- infection.

**■ Contraindications**

1. Do not use Canal-Seek to a patient having allergy and inflammation against methylene blue.
2. Reuse of the enclosed tip can cause cross-infection, so re-use of the tip is prohibited.

**■ Caution**

1. For dental use only.
2. It is not used in patients with a history of rash and hypersensitivity to dermatitis.
3. This product is used only for oral tissue. Be careful not to get into your eyes.
4. If you contact your skin or come into eyes, wash them several times with clean water and consult a specialist if necessary.
5. This product is prohibited for use other than its intended use. And the use of non-professionals is prohibited.
6. Observe the procedure and the precautions.
7. Keep it away from a reach of non-dental users including children, senior citizen and other.
8. Do not use after expiration date.
9. There is a risk of product damage, so don't give excessive impact.
10. Use of this product other than components is prohibited.

**■ Storage**

1. Store in a cool place. (1~30°C)
2. Avoid exposure to direct sunlight.

**■ Contents**

# 507 Canal-Seek 3ml x 1 syringe / Brush tips

**■ Shelf-life**

2 years from the date of manufacture

